

LIP^C1060™

Thiết bị giảm mỡ và tạo dáng cơ thể bằng
laser 1060 nm

LIP^C1060™

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bước sóng	1060 nm ± 20 nm
Mật độ công suất	0,9 W/cm ² - 1,4 W/cm ² ± 20%
Bước điều chỉnh	0,05 W/cm ²
Diện tích đầu trị liệu	Đầu trị liệu (1-4): 4 x 6 cm ²
Màn hình	LCD cảm ứng 10,1 inch
Nguồn điện	AC 220 V, 50/60 Hz
Trọng lượng	130 kg
Kích thước (R x S x C)	835 x 510 x 1697 mm



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI & HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM


VP Hà Nội: Số 4/91 Ngõ 54 Ngọc Hối, P. Hoàng Liệt, TP. Hà Nội
TTBH TP.HCM: 45/1 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM
TTBH Đà Nẵng: K100/26 Phan Văn Định, P. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0925.968.299 | marketing@hpmc.vn | www.hpmc.vn




LIP01060™

LIP01060™ là hệ thống laser 1060 nm tích hợp công nghệ chân không, giúp tối ưu hiệu quả giảm mỡ và tạo dáng cơ thể.

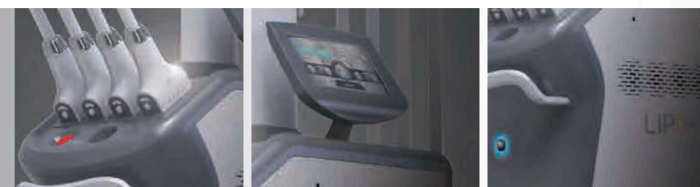


CÔNG NGHỆ 1060 NM

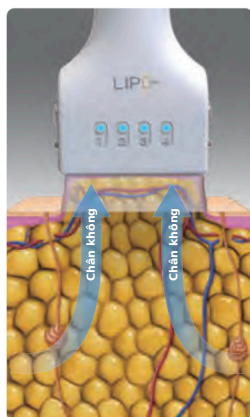


Laser 1060 nm của LIP01060™ kết hợp công nghệ chân không

Mô-đun laser của LIP01060™ tích hợp hệ thống chân không, giúp tăng mức tiếp xúc giữa vùng điều trị và mô-đun. Laser bước sóng 1060 nm làm nóng có chọn lọc lớp mỡ đến khoảng 42-47°C. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, các tế bào mỡ bị tổn thương và hoại tử. Các tế bào mỡ hoại tử sau đó được cơ thể đào thải qua quá trình chuyển hóa, tạo hiệu quả giảm mỡ và định hình cơ thể một cách tự nhiên.

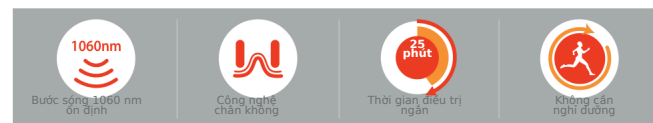


Mỗi đầu điều trị bao phủ 24,20 cm². Bốn đầu hoạt động đồng thời bao phủ tổng diện tích 96,8 cm².

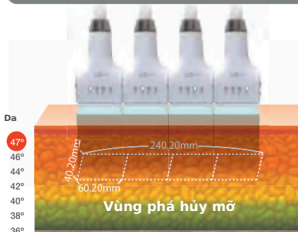


Công nghệ làm mát giúp giảm kích ứng da do năng lượng laser. Laser 1060 nm tác động có chọn lọc để phá hủy tế bào mỡ.

* Năng lượng laser tập trung ở độ sâu 2-3 cm trong mô.

Diễn biến nhiệt độ theo thời gian
Nhiệt độ tại các lớp mô khác nhau

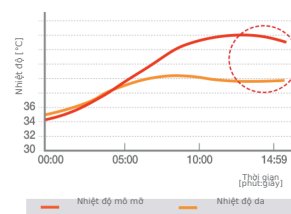

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ 1060 NM

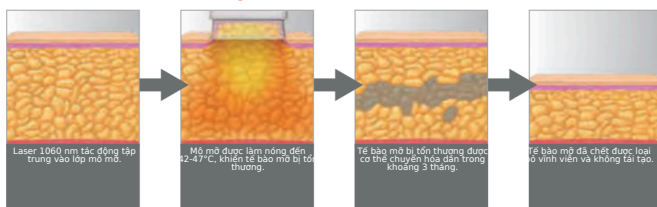


LIP01060™
Tôn vinh vẻ đẹp
Kiến tạo đường
nét
cơ thể thon gọn

VÙNG ĐIỀU TRỊ



ĐẶC TÍNH CỦA LASER BƯỚC SÓNG 1060 NM

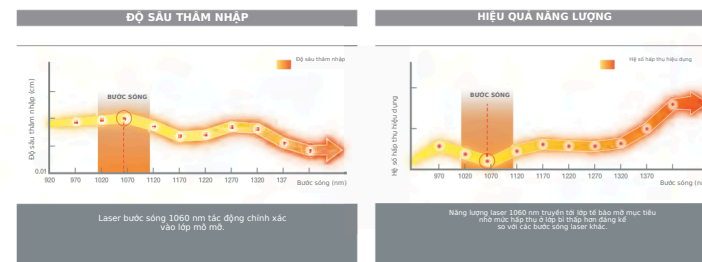

ƯU ĐIỂM

LIP01060™ giảm lớp mỡ không xâm lấn bằng 4 đầu điều trị sử dụng laser diode bước sóng 1060 nm.

- 1 Hiệu quả điều trị được tăng cường nhờ công nghệ chân không.
- 2 Thời gian điều trị ngắn (25 phút).
- 3 Vận hành rảnh tay, giảm thao tác của kỹ thuật viên.
- 4 Vận hành không xâm lấn, an toàn.
- 5 Phù hợp với mọi loại da.
- 6 Công nghệ làm mát giúp bảo vệ da trước tác động nhiệt của laser.
- 7 Cảm biến tiếp xúc trên đầu điều trị giúp nâng cao độ an toàn.