

THIẾT BỊ RF VI KIM KẾT HỢP TIÊM TỰ ĐỘNG

RF COMBO JECTOR

Tác động kép trong một thiết bị cầm tay không dây



BOMTECH • KOREA

CHÍNH XÁC TỪNG THÔNG SỐ

Kiểm soát độ sâu, liều lượng và thời gian - kết hợp lực hút hỗ trợ ổn định vùng tác động.


RF 1 MHz

ĐỘ SÂU 0,2-5,0 mm

KHÔNG DÂY

Tác động kép. Kiểm soát chính xác.


RF Combo Jector kết hợp tiêm tự động và RF vi kim trong cùng một nền tảng cầm tay, giúp chuẩn hóa các thông số thao tác theo phác đồ chuyên môn.

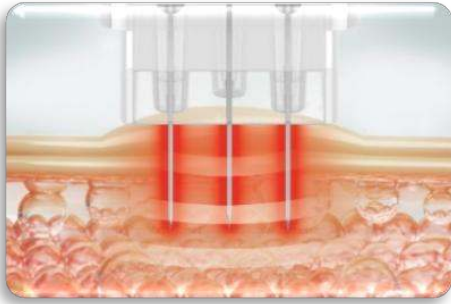

01 / RF VI KIM

Năng lượng RF 1 MHz

Tác động năng lượng RF tại độ sâu được cài đặt thông qua đầu kim phù hợp.

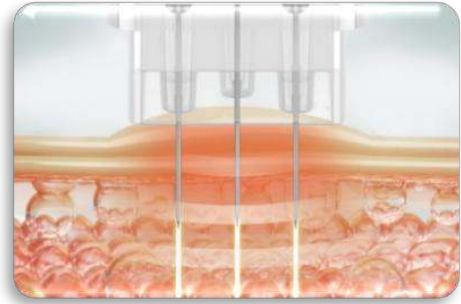

02 / TIÊM TỰ ĐỘNG

Định lượng có kiểm soát

Điều chỉnh độ sâu, liều lượng và thời gian để phù hợp mục tiêu sử dụng.

DOUBLE IMPACT • ONE SHOT

KẾT HỢP TRÊN CÙNG MỘT THIẾT BỊ



RF NEEDLING

Năng lượng RF tác động có kiểm soát.



AUTO INJECTION

Syringe tự động hóa thao tác đưa dung dịch.



SUCTION SUPPORT

Hút bám hỗ trợ ổn định và hạn chế thất thoát.

Công nghệ cốt lõi

Thiết kế nhỏ gọn nhưng tập trung vào các yếu tố quan trọng trong thao tác: năng lượng, độ sâu, liều, thời gian và độ ổn định trên bề mặt da.

1

RF 1 MHz / Bipolar RF

Nền tảng RF được hăng công bố cho RF Combo Jector.

2

Kiểm soát độ sâu

Điều chỉnh từ 0,2 mm đến tối đa 5,0 mm theo cấu hình.

3

Liều lượng & thời gian

Thiết lập tham số tiêm tự động trên thân máy.

4


Lực hút hỗ trợ

Tăng độ bám vùng tác động, hỗ trợ hạn chế thất thoát dung dịch.

5

Thiết kế không dây

Thuận tiện thay đổi góc cầm và di chuyển trong phòng điều trị.

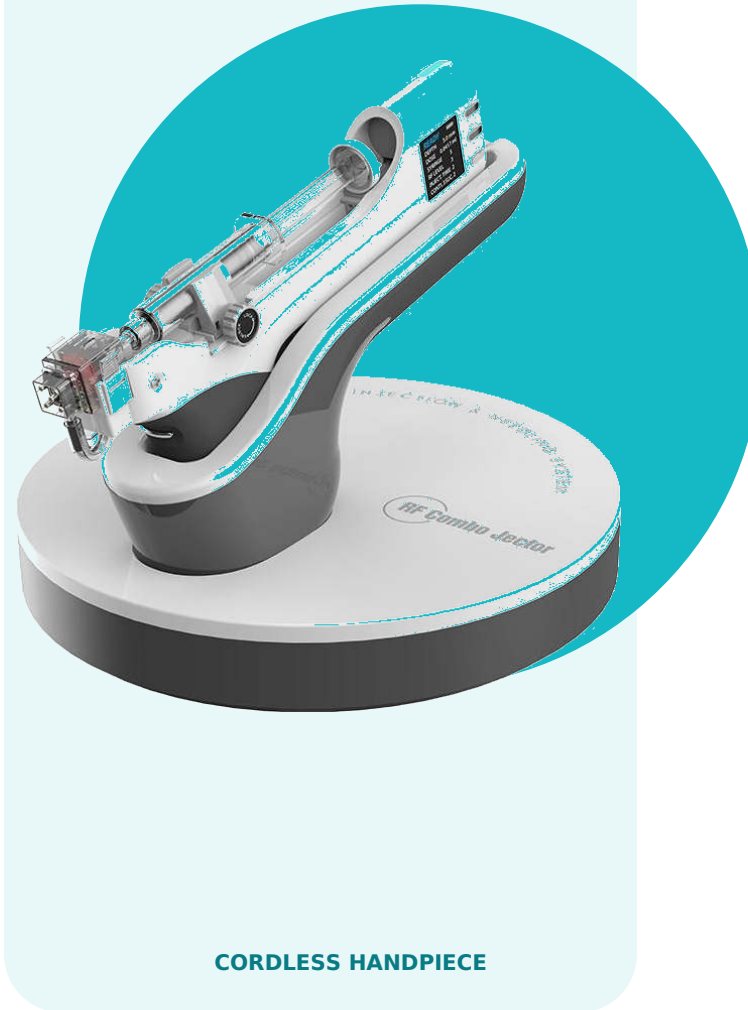

CORDLESS HANDPIECE

1 MHz

TẦN SỐ RF

0,2-5,0 mm

ĐỘ SÂU TỐI ĐA

1,0 kg

KHỐI LƯỢNG TÍNH

Định hướng ứng dụng chuyên môn

Theo thông tin chính hãng, RF Combo Jector được giới thiệu cho các mục tiêu liên quan đến bề mặt và chất lượng da. Chỉ định cụ thể cần do người có chuyên môn đánh giá.



FIVE FOCUS AREAS

Cải thiện chất lượng da

Tiếp cận đa mục tiêu trên cùng một nền tảng thiết bị.

01

SẸO MỤN

Hỗ trợ cải thiện bề mặt sẹo theo phác đồ phù hợp.

02

LỖ CHÂN LÔNG

Hướng tới bề mặt da mịn và đồng đều hơn.

03

NẾP NHĂN

Hỗ trợ các mục tiêu trẻ hóa và cải thiện nếp nhăn.

04

SẮC TỐ

Được hãng liệt kê trong nhóm ứng dụng sản phẩm.

05

TRẺ HÓA DA

Hỗ trợ nâng cao chất lượng và diện mạo làn da.

LƯU Ý

Hiệu quả phụ thuộc tình trạng da, phác đồ, vật tư sử dụng và năng lực người thực hiện; không dùng catalog thay cho hướng dẫn sử dụng.

Tối ưu cho thao tác lâm sàng

Hình thái cầm tay không dây, màn hình hiển thị trên thân máy và tùy chọn xe đẩy hỗ trợ bố trí linh hoạt trong không gian điều trị.



AUXILIARY CART • TÙY CHỌN

Cầm hai hướng

Thiết kế hỗ trợ thao tác cầm ngang hoặc dọc và lựa chọn nút bấm thuận tay.

Màn hình trên thân máy

Theo dõi trực tiếp các thông số cài đặt trong quá trình chuẩn bị thao tác.

Không dây, pin Li-ion

Pin 3,7 V - 3.000 mAh hỗ trợ tính cơ động trong phòng điều trị.

Suction technology

Hút bám hỗ trợ ổn định da, hạn chế trượt và thất thoát dung dịch theo hãng.

Tương thích vật tư

Hỗ trợ các filler/skin booster phù hợp theo cartridge, IFU và quy định hiện hành.

COMPACT BY DESIGN

Kích thước thân máy 250 × 250 × 200 mm; khối lượng tịnh 1,0 kg.

Quy trình vận hành gợi ý

Khung dưới đây hỗ trợ chuẩn hóa luồng công việc. Người vận hành phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng, hồ sơ pháp lý và quy trình chuyên môn tại cơ sở.

01

Đánh giá & chỉ định

Đánh giá tình trạng da, chống chỉ định và xác định mục tiêu điều trị.

02

Chuẩn bị vật tư

Chọn cartridge, syringe và dung dịch phù hợp; kiểm tra vô khuẩn và hạn dùng.

03

Cài đặt tham số

Thiết lập độ sâu, liều, thời gian, RF và lực hút theo phác đồ được duyệt.

04

Thực hiện & theo dõi

Duy trì thao tác ổn định; quan sát đáp ứng và điều chỉnh trong phạm vi cho phép.

05

Chăm sóc sau điều trị

Ghi nhận thông số, hướng dẫn chăm sóc và kế hoạch tái khám/đánh giá.

AN TOÀN LÀ ƯU TIÊN

Thiết bị y tế cần được vận hành bởi người có chuyên môn, đã được đào tạo và đáp ứng quy định hiện hành. Không tự ý sử dụng ngoài chỉ định hoặc thay thế tài liệu IFU.

Thông số kỹ thuật

Thông số tham khảo từ BOMTECH Company Profile 2026 và trang sản phẩm chính hãng; cấu hình bàn giao cần được đối chiếu với hồ sơ đi kèm thiết bị.

MODEL	RF COMBO JECTOR
CÔNG NGHỆ	Tiêm tự động kết hợp RF vi kim
TẦN SỐ / LOẠI NĂNG LƯỢNG	1 MHz / Bipolar RF
ĐỘ SÂU KIM	0,2 mm - 5,0 mm (tối đa)
KÍCH THƯỚC	W 250 × D 250 × H 200 mm
KHỐI LƯỢNG TỊNH	1,0 kg
NGUỒN VÀO	AC 220-240 V~, 50/60 Hz, 0,15-0,3 A
PIN	Li-ion 3,7 V, 3.000 mAh
TÙY CHỌN	Auxiliary Cart / xe đẩy phụ trợ
HÃNG SẢN XUẤT	BOMTECH Electronics Co., Ltd.
XUẤT XỨ	Hàn Quốc
CHỨNG NHẬN ĐƯỢC HÃNG CÔNG BỐ	Medical CE*

GHI CHÚ PHÁP LÝ

* Tình trạng chứng nhận/đăng ký có thể khác nhau theo model, cấu hình và thị trường. Khi mua hàng, cần kiểm tra IFU, CO/CQ, hồ sơ lưu hành và tài liệu của đúng thiết bị bàn giao.

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CẦN NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

HPMED hỗ trợ xây dựng giải pháp thiết bị phù hợp mô hình spa, thẩm mỹ viện và phòng khám.

TƯ VẤN CẤU HÌNH

LẮP ĐẶT & ĐÀO TẠO

BẢO HÀNH - HẬU MÃI

HỖ TRỢ MARKETING


NHẬN BÁO GIÁ & HỒ SƠ SẢN PHẨM

Liên hệ HPMED để được tư vấn cấu hình RF Combo Jector phù hợp nhu cầu đầu tư và phạm vi hoạt động của cơ sở.

HPMED VIỆT NAM

Hotline / Zalo: 0966 368 299

Website: www.hpmed.vn

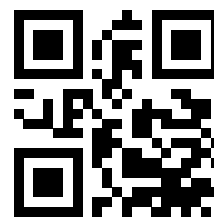

QUÉT ĐỂ TRUY CẬP HPMED.VN

Tài liệu giới thiệu sản phẩm. Không thay thế hướng dẫn sử dụng hoặc tư vấn chuyên môn. Hình ảnh có tính minh họa; thông số có thể thay đổi theo cấu hình và thị trường.