

CATALOG SẢN PHẨM

MÁY TRIỆT LÔNG DIODE LASER HIDL 1800W

4 BƯỚC SÓNG

755 + 808 + 940 + 1064 nm

CÔNG SUẤT TAY CẦM 1800W

Năng lượng vận hành tiêu chuẩn: 10 J + 5 ms

- Độ rộng xung siêu ngắn
- Thanh diode tuổi thọ cao
- Công suất mạnh mẽ, đầu ra ổn định




ƯU ĐIỂM ĐẦU ĐIỀU TRỊ

Một tay cầm sử dụng nhiều đầu với kích thước điểm sáng khác nhau - linh hoạt cho từng vùng cơ thể.

3,8 cm²
13,5 × 28,5 mm



1,8 cm²
12,5 × 14,5 mm

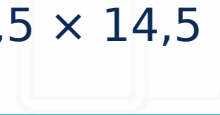

ĐẦU TRÒN
Ø 8,25 mm | Điểm 5 mm



VÙNG ĐIỀU TRỊ GỢI Ý

KHUÔN MẶT: 12,5 × 14,5 mm hoặc đầu tròn Ø 8,25 mm

NÁCH: 12,5 × 14,5 mm

LƯNG: 13,5 × 28,5 mm

VÙNG BIKINI: 12,5 × 14,5 mm

TRÁN: 12,5 × 14,5 mm

VÙNG MŨI: Đầu tròn Ø 8,25 mm

MÉP: 12,5 × 14,5 mm

CÁNH TAY: 13,5 × 28,5 mm

NGỰC: 13,5 × 28,5 mm

CHÂN: 13,5 × 28,5 mm

CÔNG NGHỆ FAC - CHUẨN TRỰC TRỰC NHANH

THẤU KÍNH CHUẨN TRỰC HỘI TỤ CHÙM TIA

Chuẩn trực đường truyền ánh sáng, giảm góc phân kỳ của chùm tia và biến đường truyền phân kỳ thành đường truyền song song. Nhờ đó, mép chùm laser trở nên đồng đều và mượt hơn.




CÔNG NGHỆ FAC - HIỆU QUẢ ĐỊNH HÌNH CHÙM TIA


Fast Axis Collimator



SAU KHI BỔ SUNG THẤU KÍNH CHUẨN TRỰC:
Chùm tia hội tụ và phân bố đồng đều.

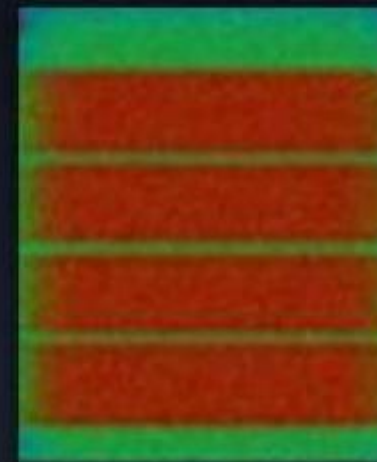

KHI KHÔNG TẠO HÌNH QUANG HỌC:
Chùm tia phân kỳ nhanh.

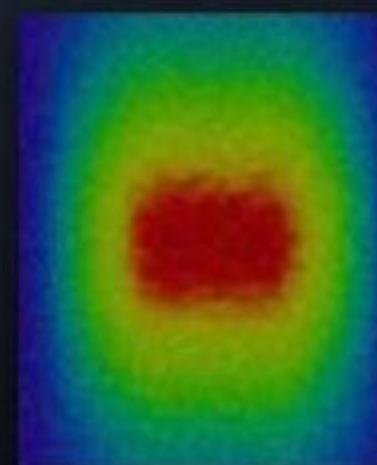

ĐIỂM SÁNG LỚN


ĐẦU ĐIỀU TRỊ SIÊU LỚN

5,2 cm² | 13,5 × 38,5 mm

Đầu điều trị thế hệ mới với diện tích điểm sáng đặc biệt lớn, giúp thao tác nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho khách hàng.

NHANH HƠN
ĐẾN 40%

*Theo thông tin trong catalog gốc.

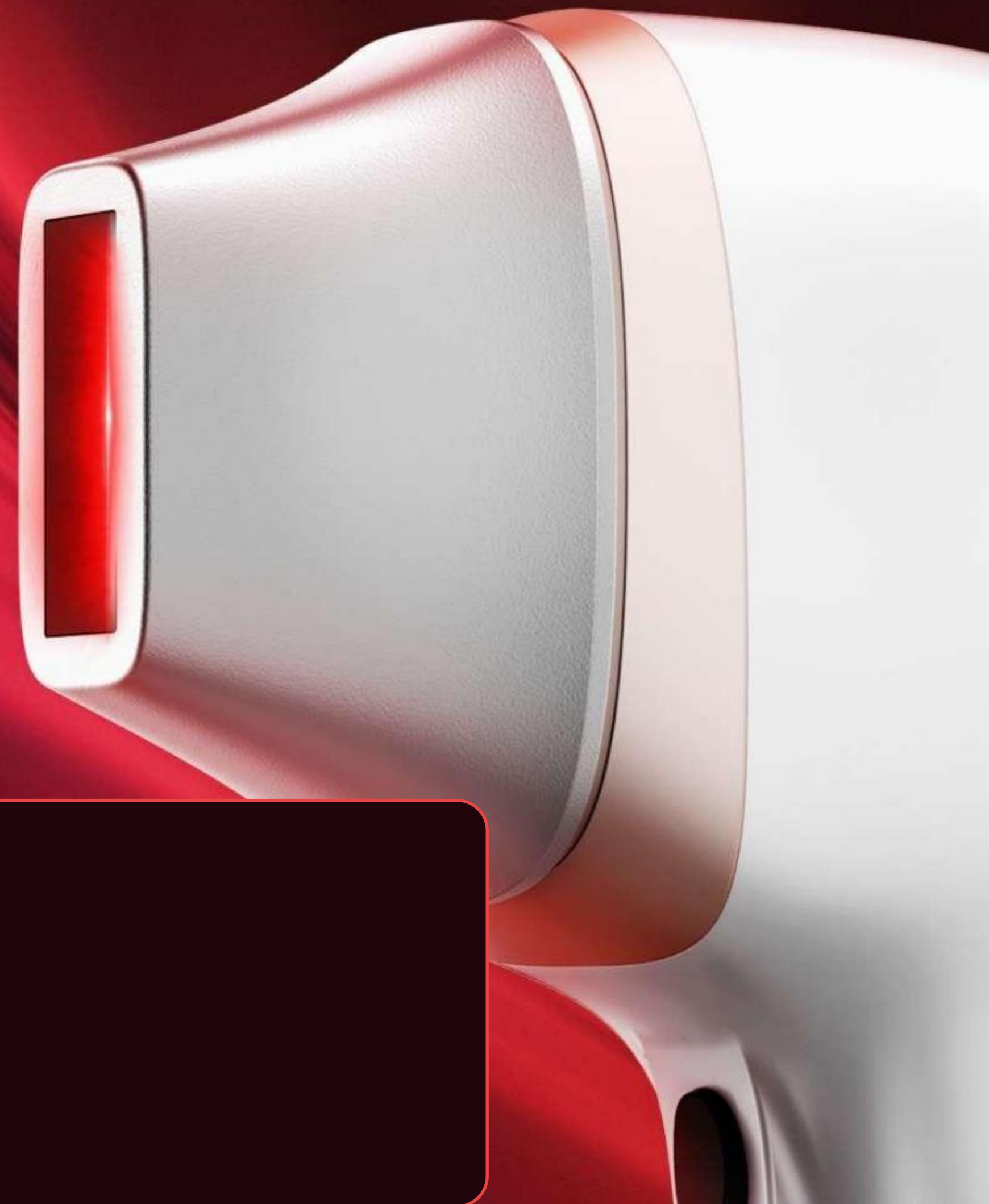

MÀN HÌNH TRÊN TAY CẦM

MÀN HÌNH CẢM ỨNG LCD



Điều chỉnh năng lượng




Điều chỉnh độ rộng xung



Điều chỉnh tần số



Theo dõi nhiệt độ theo thời gian thực

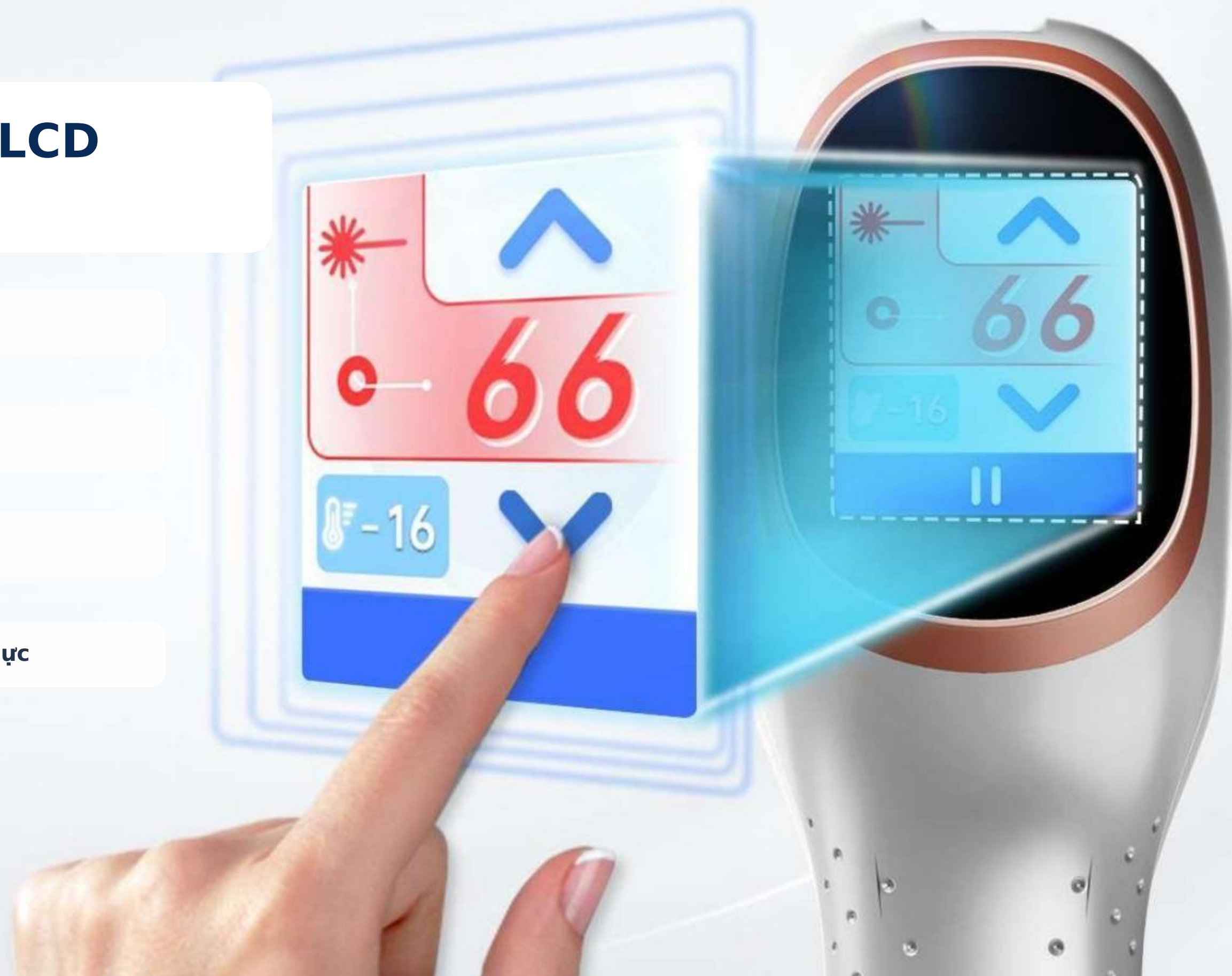


ĐẦU THAY NHANH NAM CHÂM

KẾT NỐI NAM CHÂM MẠNH MẼ VÀ AN TOÀN

Liên kết nam châm đủ chắc chắn để hạn chế tối đa tình trạng đầu điều trị bị tuột ngoài ý muốn, giúp quá trình thao tác ổn định và an toàn hơn.



THANH DIODE LASER COHERENT HOA KỲ

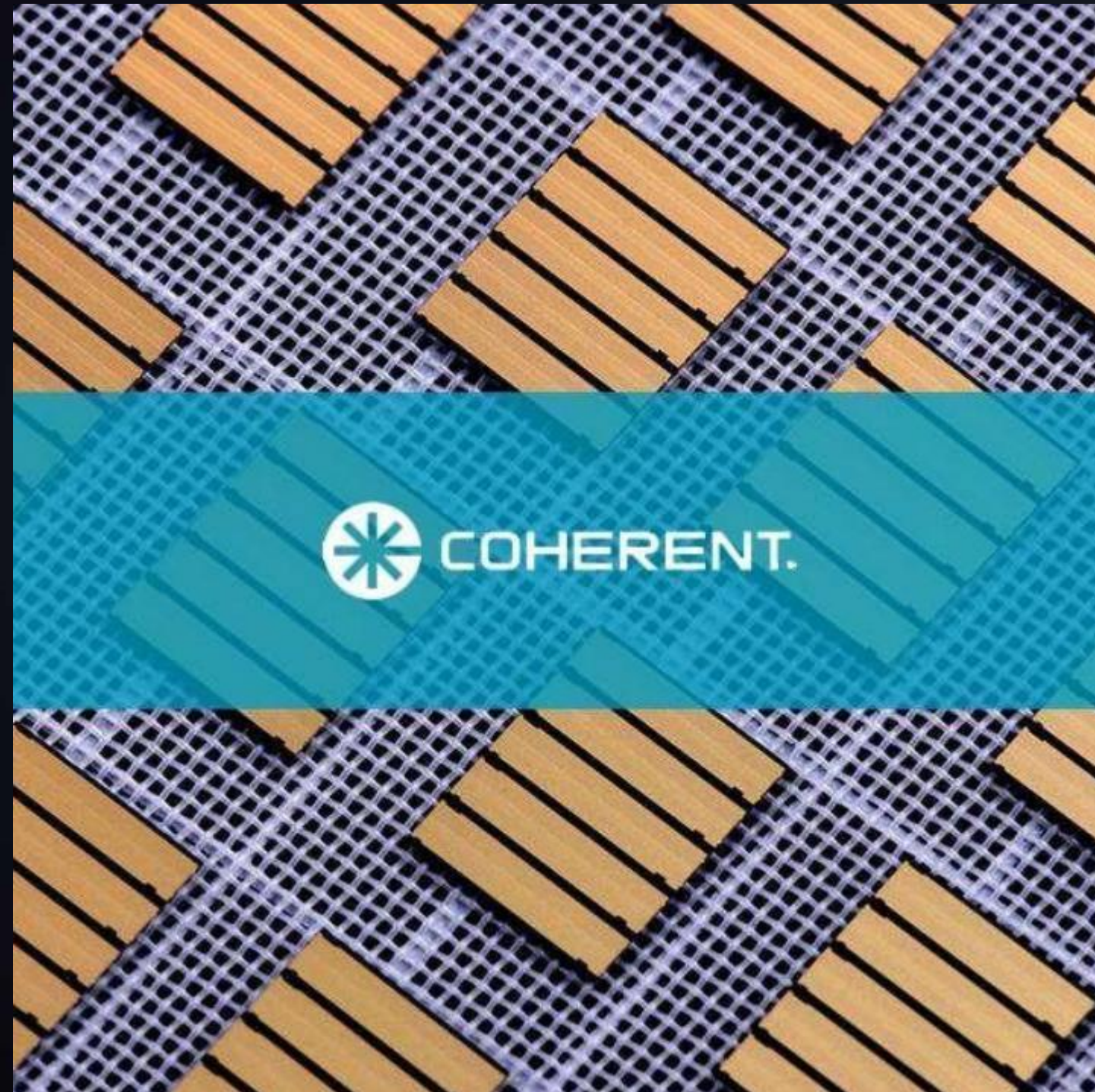

LINH KIỆN LASER NHẬP KHẨU TỪ HOA KỲ

Ứng dụng công nghệ laser Coherent của Hoa Kỳ. Thanh diode nguyên bản được tích hợp trong bộ phát laser nhằm duy trì đầu ra ổn định và đủ công suất. Linh kiện chất lượng cao góp phần kéo dài tuổi thọ nguồn laser.

THIẾT KẾ CHỐNG NƯỚC

KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC VƯỢT TRỘI


Thiết kế tay cầm chú trọng khả năng chống nước, hỗ trợ độ bền và sự ổn định trong quá trình vận hành.



ĐỘ ỒN THẤP

NÓI KHÔNG VỚI TIẾNG ỒN

Vận hành êm ái, góp phần tạo không gian làm việc yên tĩnh và thuận tiện hơn cho khách hàng và người vận hành.

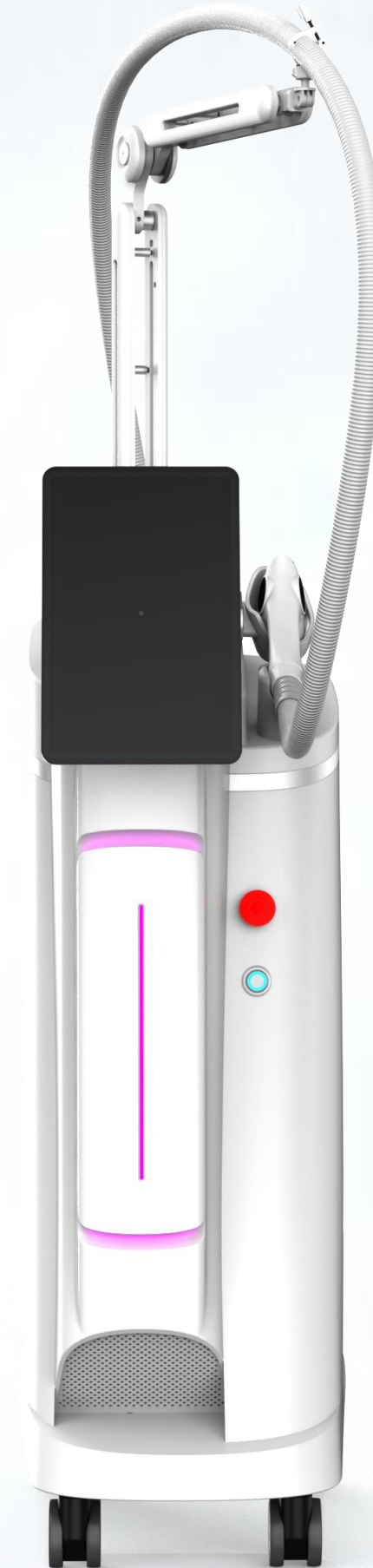

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH

LÀM LẠNH TIẾP XÚC 360°

LÀM LẠNH MẠNH MỀ TRẢI NGHIỆM THOẢI MÁI

Công nghệ làm lạnh TEC hiệu suất cao giúp làm mát bề mặt tiếp xúc trong quá trình sử dụng, hỗ trợ trải nghiệm thoải mái hơn và tối ưu hiệu quả vận hành.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BƯỚC SÓNG	755 + 808 + 940 + 1064 nm
MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG	5 - 80 J/cm²
ĐỘ RỘNG XUNG	5 - 100 ms
KÍCH THƯỚC ĐIỂM SÁNG	12,5 × 14,5 mm 13,5 × 28,5 mm 13,5 × 38,5 mm Đầu tròn Ø 8,25 mm
TẦN SỐ	1 - 10 Hz
CÔNG SUẤT TAY CẦM	1800 W
CÔNG SUẤT MÁY	4500 W
HỆ THỐNG LÀM MÁT	TEC + không khí + nước + bán dẫn
LÀM LẠNH TAY CẦM	Đến -16 °C
MÀN HÌNH	Cảm ứng đa sắc 12 inch




CHỨNG NHẬN



US FDA
EUROPE MEDICAL CE (TUV) APPROVED

FDA HOA KỲ • CE CHÂU ÂU

Hồ sơ chứng nhận được minh họa theo tài liệu của nhà sản xuất.

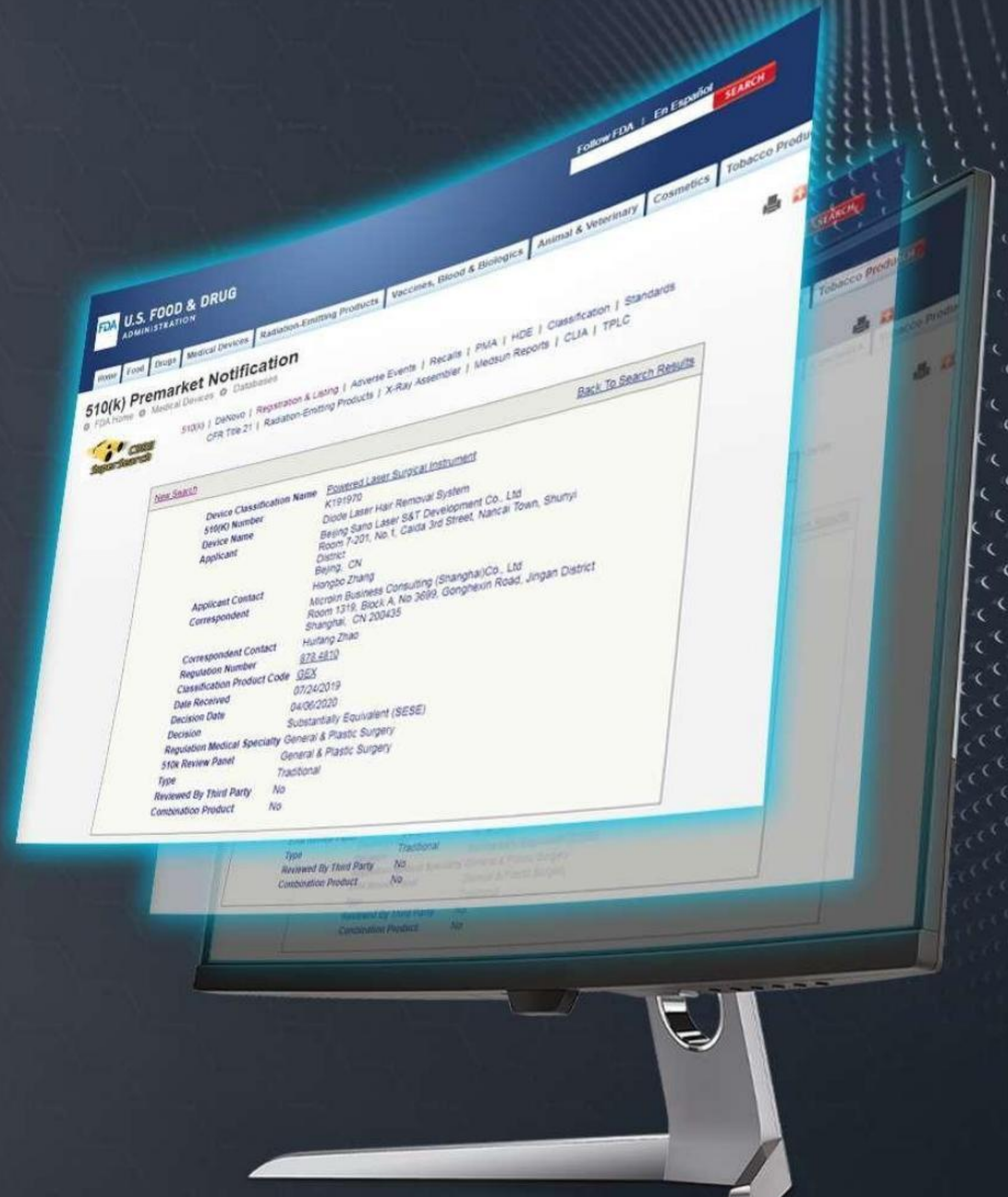

HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU

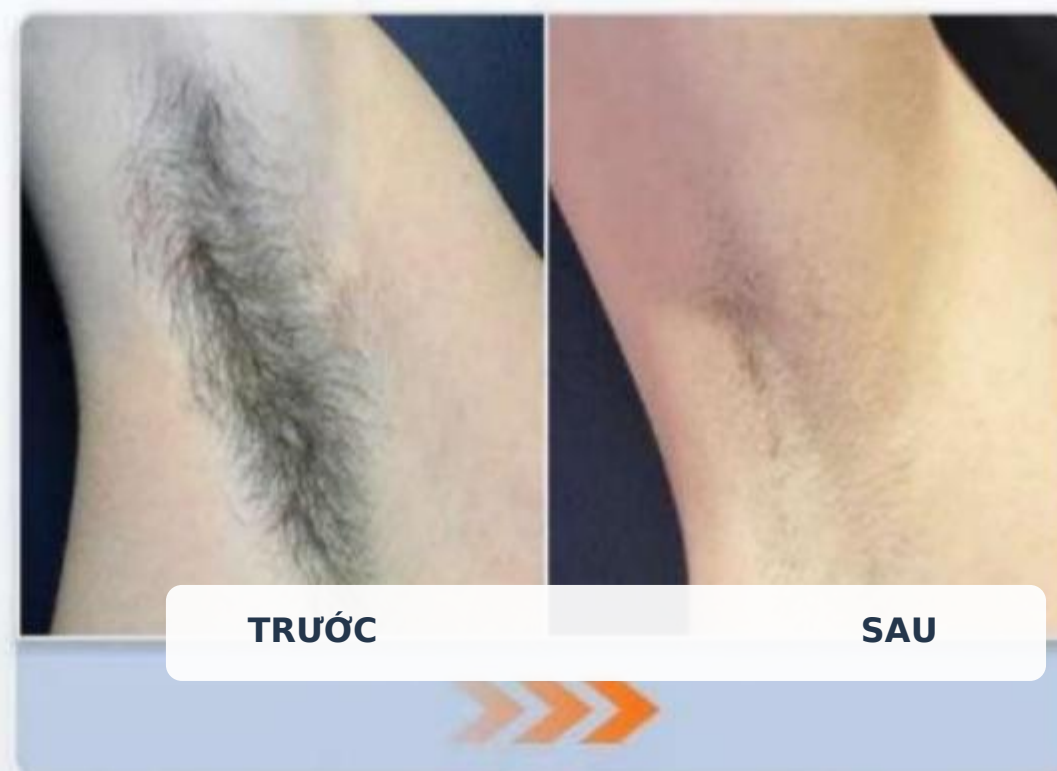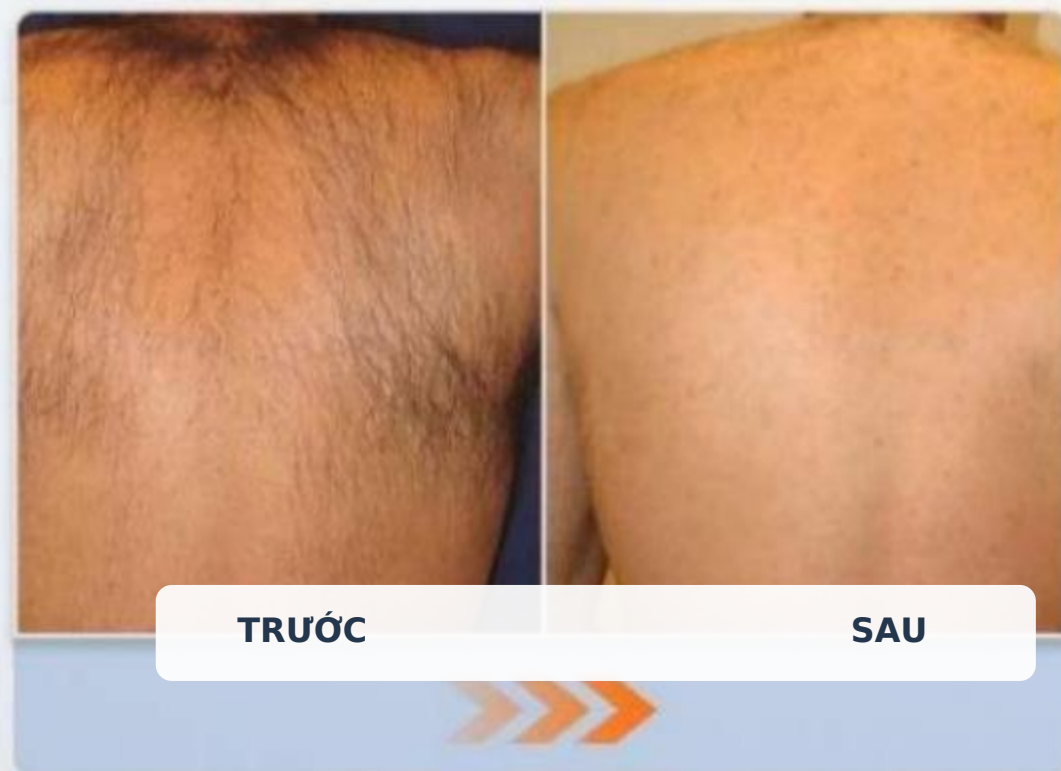

Hình ảnh minh họa do nhà sản xuất cung cấp; kết quả có thể khác nhau.

